

## Verkorte –‘oh ja’- instructie

### Nb. GEEN eten en drinken in het user lab

Houd de ruimte netjes... er staat dure apparatuur en er zijn meer mensen die er gebruik van gaan maken.

**Problemen?** Lees de **rode tekstfragmenten** of:

Email mij, bel mij of kom langs op TTH 01A34.

Michel Alders | Coördinator user lab – Kamer 02A36 | Docent CMD | Domein Media Creatie en Informatie | Hogeschool van Amsterdam | Bezoekadres: Theo Thijssenhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam | Kamer 01A34 | Postbus 1025 – 1000 BA Amsterdam | ☎ 020 595 1868 - 06 4901 2723 | ✉ [m.alders@hva.nl](mailto:m.alders@hva.nl)

### Geen beeld op Tobii scherm?


Zet het Tobii scherm aan (knop zijkant). Als dit niet helpt:

Herstart de PC (alt4-enter; alt4-enter; alt4-enter ...) maar laat het Tobii scherm aanstaan.

Zet het te testen materiaal (eventueel) op de PC.


Start Tobii op (vanuit start menu).

Create New Project:

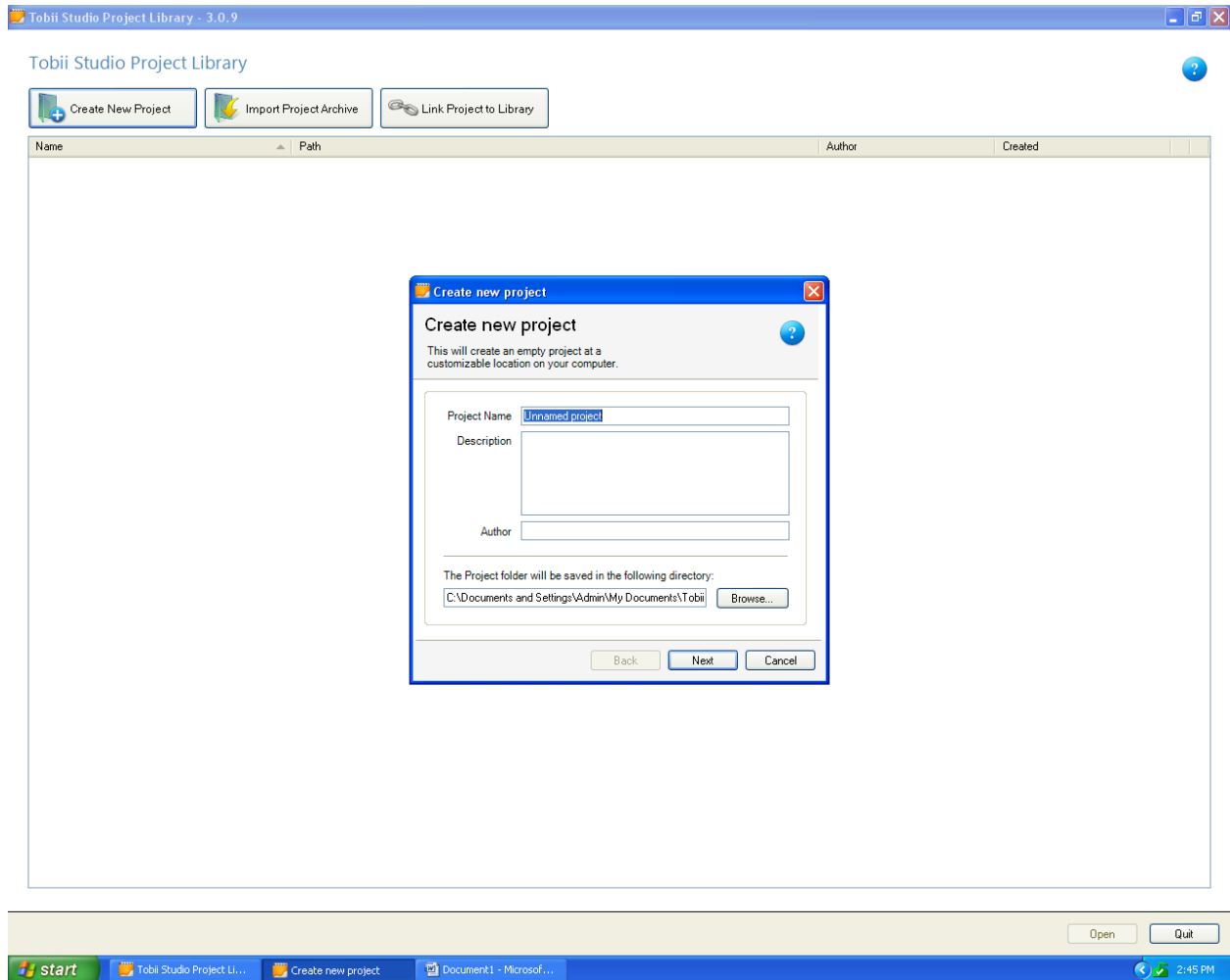

Geef hier een goede, unieke naam voor je project (en goede opslag locatie (desktop)).

Voer ook in de daaropvolgende schermen goede namen in (naam van de test, proefpersoon etc)

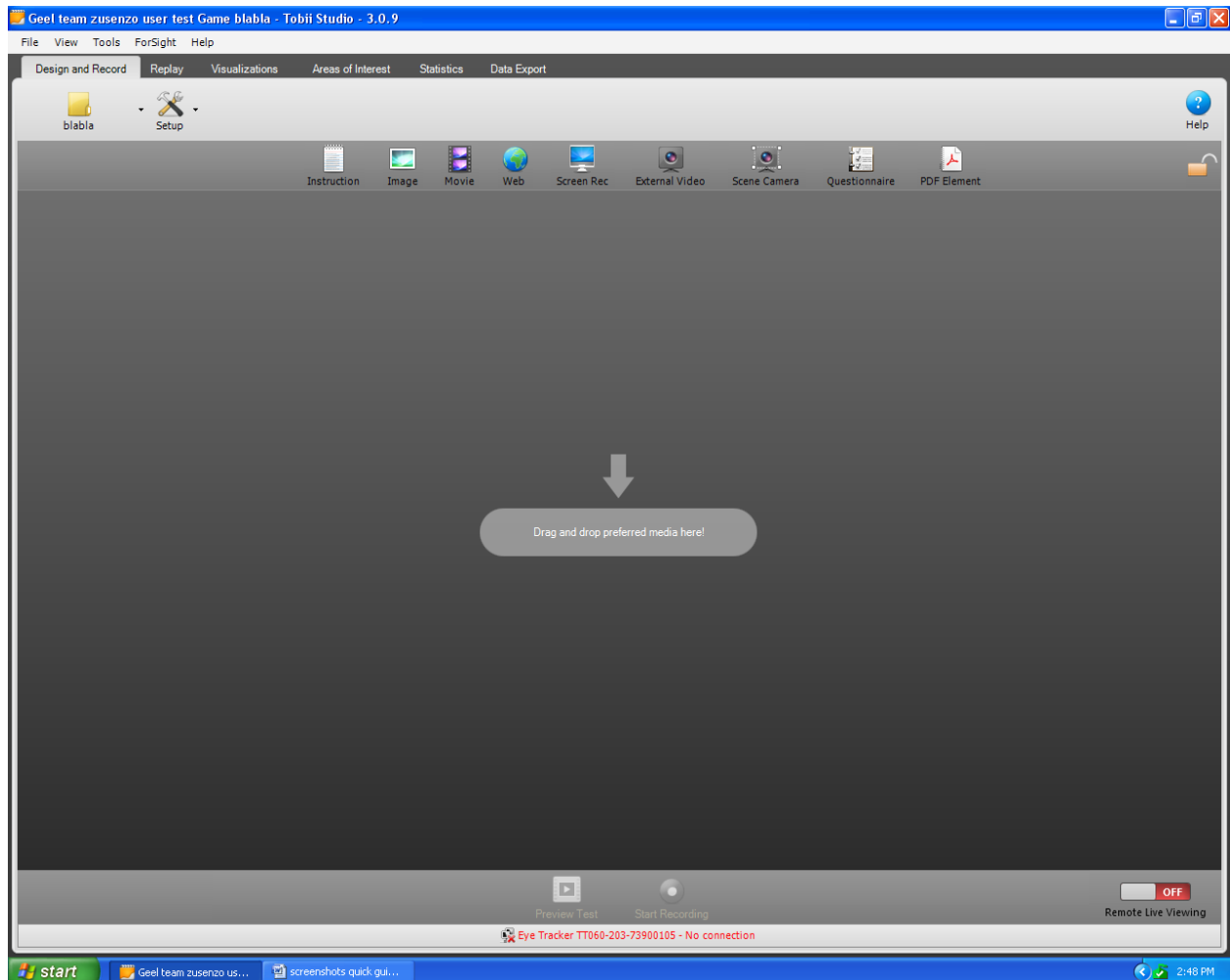



Klik op “**Eye Tracker... - no connection**” om de eyetracker te activeren

Klik ook 1 keer op “**Off**” van de ‘Remote Live Viewing’ om deze aan te zetten (duurt 5 seconden)

**NOTE:** ‘Remote Live Viewing’ wordt getoond in de observatieruimte. Zet daarom in de observatieruimte het TV scherm aan. Start daar ook de computer op en klik op het Tobii icoon (op de desktop). In Tobii plak je het IP-adres (dat je gekopieerd hebt uit het Notepad bestand dat ook op de desktop staat).

Sleep elementen (bv 'Screen Rec') vanuit de regel naar beneden (het grijze 'drag and drop' veld in) en druk daarna op Start recording:

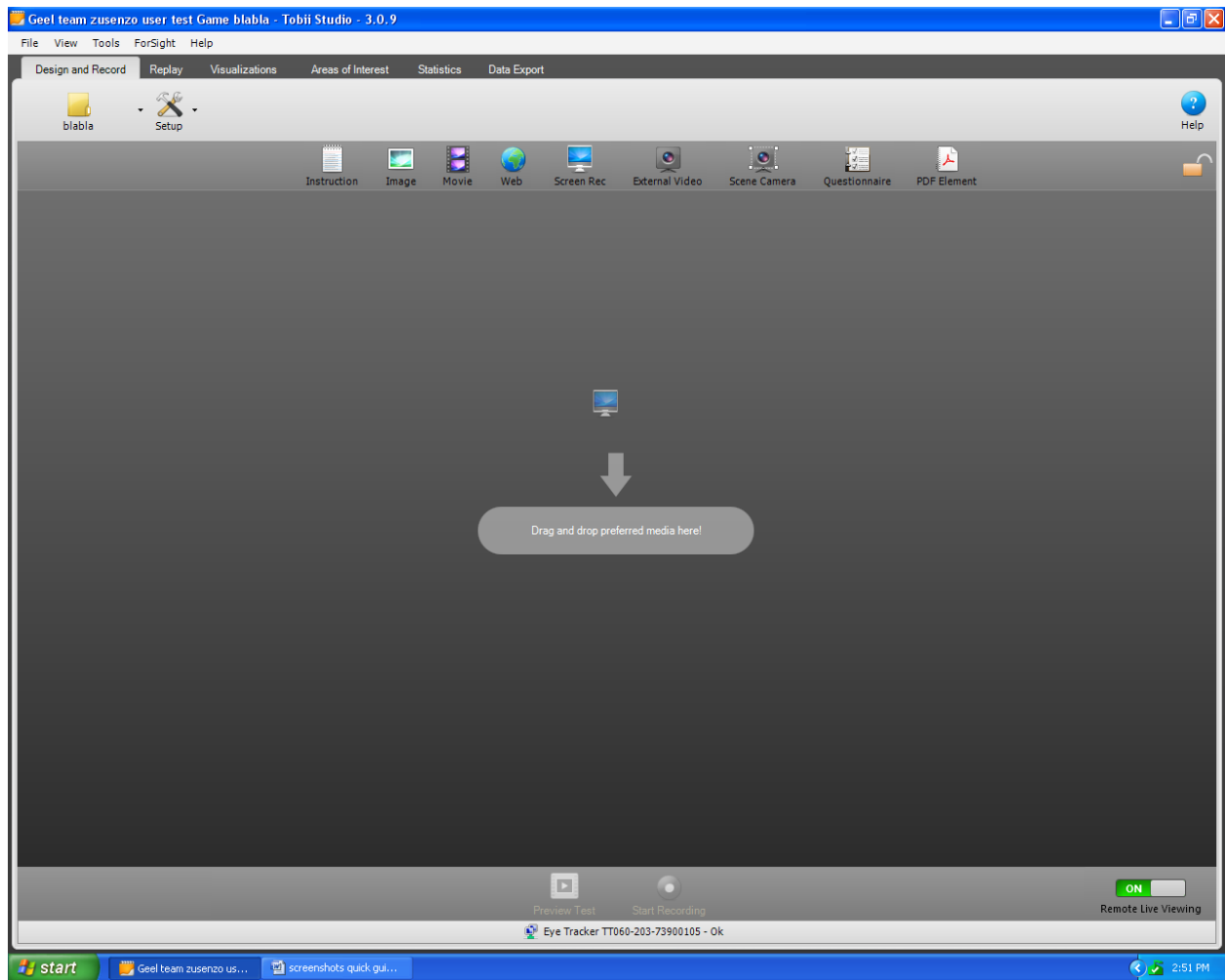

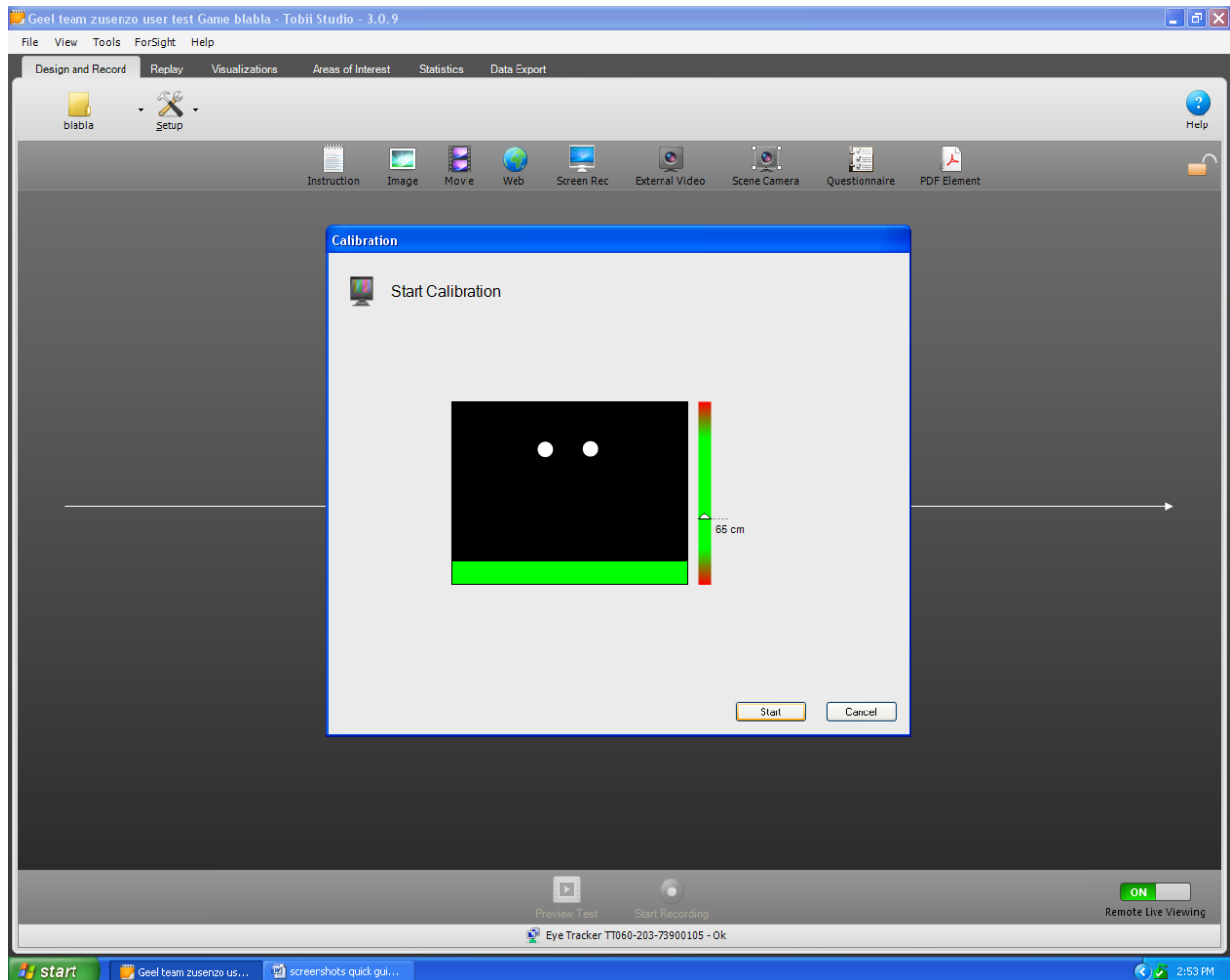


Zodra je hier bent (klaar om te kalibreren), mag de proefpersoon achter de computer plaatsnemen.

Nb. Let er op dat de proefpersoon goed zit.

Nb. Let op de afstand tussen de proefpersoon en de computer (verticale balk).

Zodra de proefpersoon klaar is voor de test, start deze (of jij) de recording (Nb. de naam vd proefpersoon kan nog ingevuld):

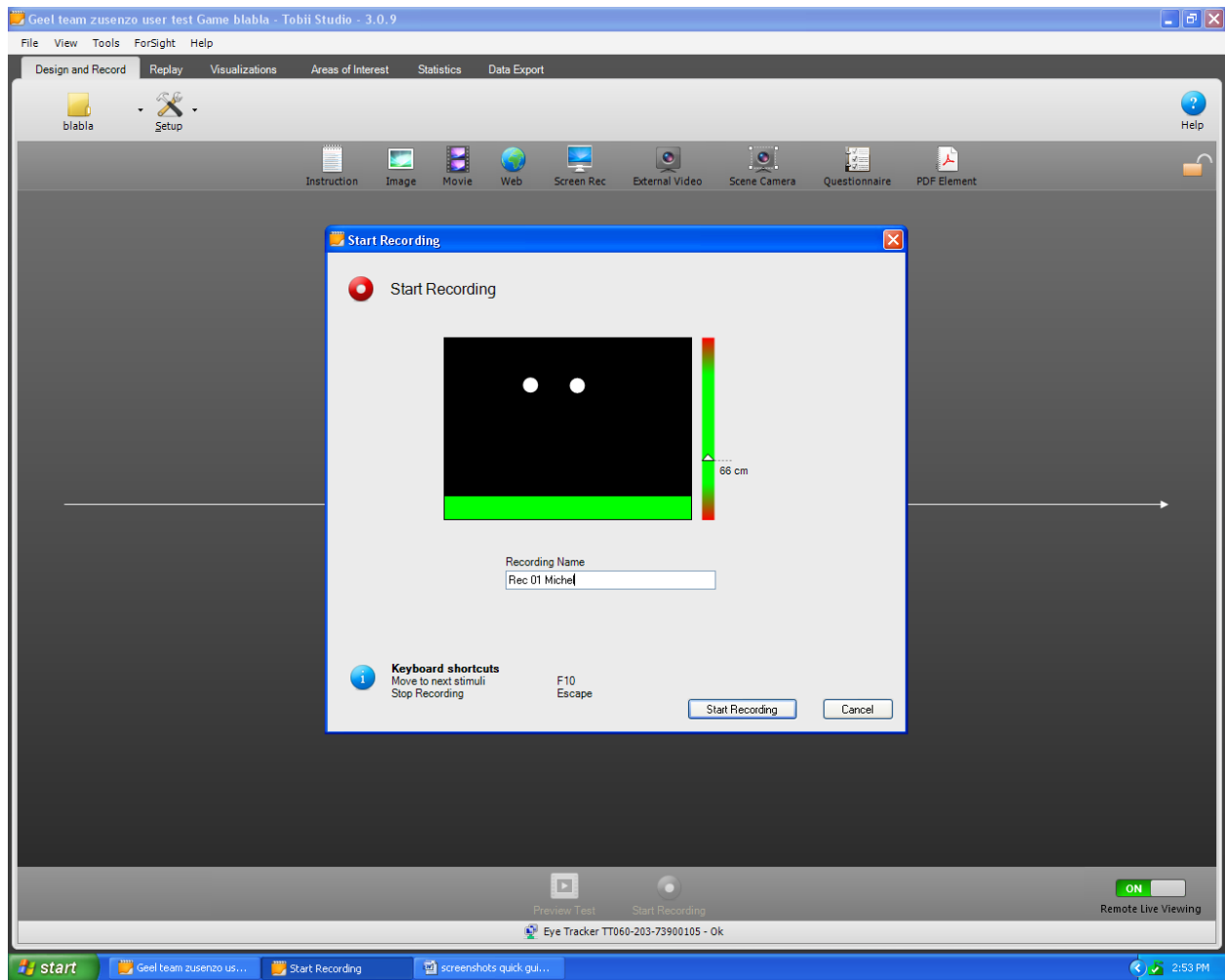


Gebruik **F10** als de opname gestopt en bewaard kan worden (of om naar het volgende element te gaan, e.g. een vragenlijst)

Het duurt een paar seconden voor Tobii weer tevoorschijn komt.


Gebruik Esc om de test te stoppen en te bewaren; eventuele elementen (e.g. questionnaire) die nog op stapel stonden, worden niet meer getoond.

## Resultaten verwerken

Ga naar het tabblad Replay en klik op Export om een film te maken (of andere visualisaties):

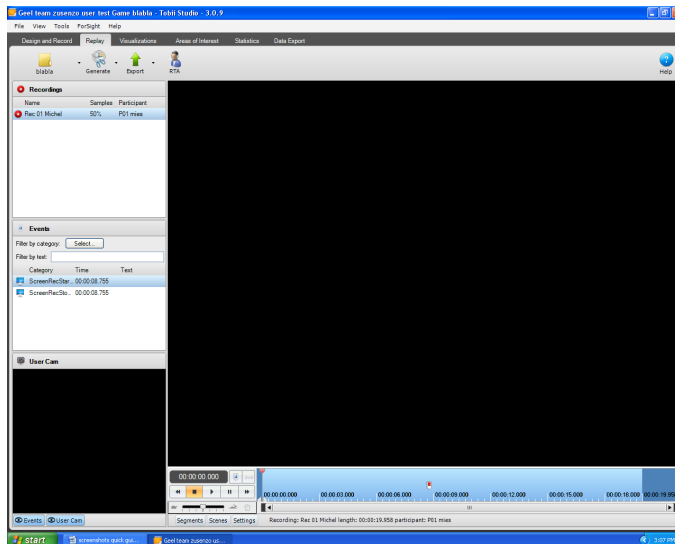

(1) Pas de Picture in Picture (webcam beeld) aan, (2) selecteer “all recordings in current test” en (3) check of de desktop folder als bestemming ingesteld staat:

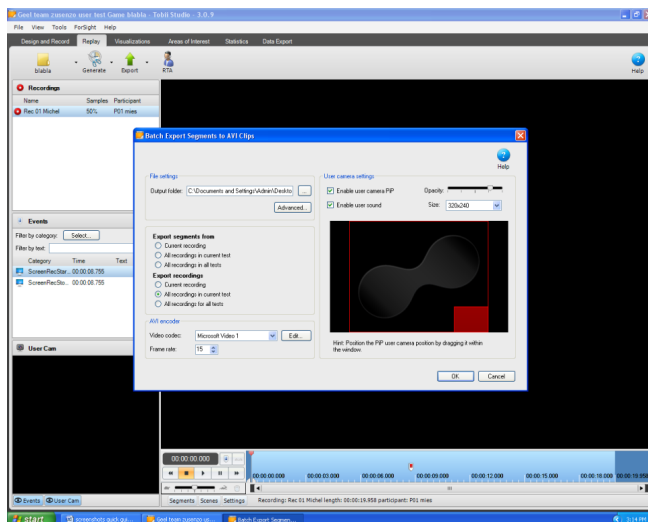

**Vergeet je film niet mee te nemen!**

**Dit is het IP adres dat je invoert in Tobii op de PC in de observatieruimte:**

**145.28.46.109**